




3D MEDICAL INNOVATION



DISTRACTOR DE CUERPO MANDIBULAR HEXAGONAL FIXED

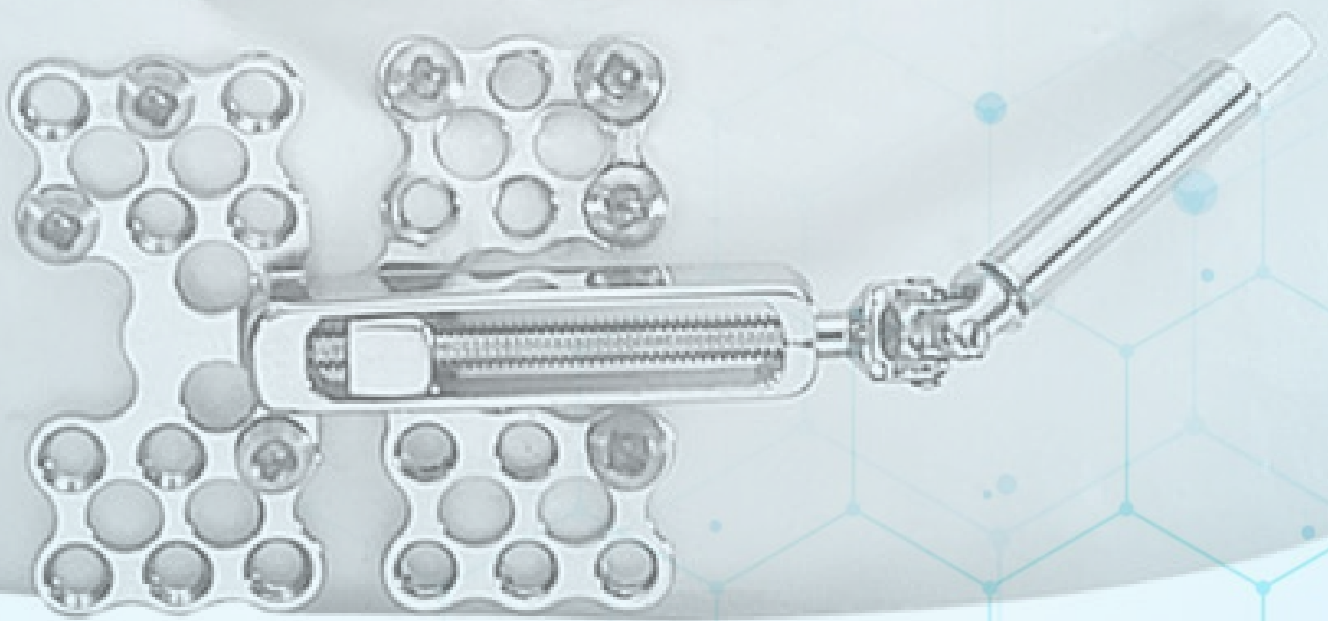

+57 310 3363728



info@3dmedical.com.co



www.3dmedical.com.co

DISTRACTOR DE CUERPO MANDIBULAR HEXAGONAL FIXED

DESCRIPCIÓN

Dispositivo intraoral para la distracción controlada y medible del cuerpo mandibular:

- Yuxtaóseo con barra de activación intraoral.
- Fácilmente aplicable tanto en el lado izquierdo como en el derecho de la mandíbula, modelando y cortando las placas.
- Disponible en dos modelos con un rango de distracción de hasta 15 mm y 20 mm.

Manufactura hecha en impresoras 3D y tornos CNC de 5 ejes, biomateriales titanio grado médico, Cromo cobalto y acero quirúrgico, adaptables 100% a cualquier anatomía o defecto preexistente del paciente.



Distractor de bajo perfil, con un grosor inferior a 4 mm, apenas perceptible por el paciente



Fácil de posicionar, ya que el ancho de la placa permite colocar los tornillos en la posición más favorable.



Puede aplicarse tanto en el lado izquierdo como en el derecho de la mandíbula. Minimiza el stock en almacén.



La parte sobrante de la placa puede retirarse cortándola.



Al finalizar el periodo de distracción, se retira el dedal intraoral y se espera la consolidación del hueso, el distractor permanece bajo la mucosa.






Para ser implantado con tornillos quirúrgicos 2,0 y los instrumentos relacionados.



3D MEDICAL INNOVATION

DISTRACTOR DE CUERPO MANDIBULAR HEXAGONAL FIXED

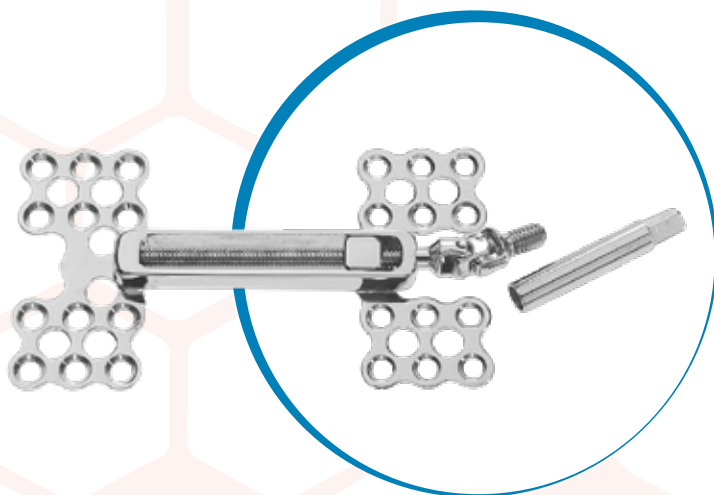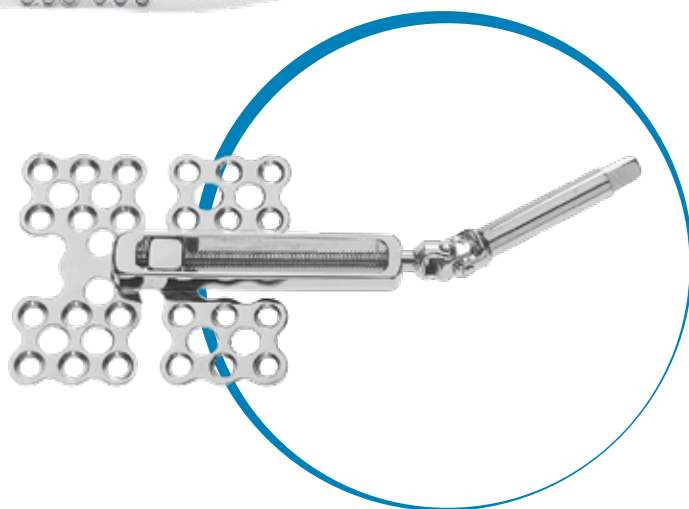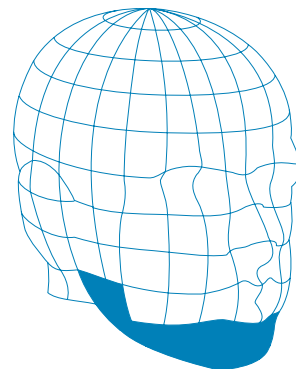

+57 310 3363728



info@3dmedical.com.co



www.3dmedical.com.co



3D MEDICAL INNOVATION